



BMC Medical Co., Ltd.

3/F, Building No.4, No.1 Xinxing Road, Wuqing District, Tianjin 301700, China
Tel: +86-22-8293 9881 Fax: +86-22-8293 9881 etx. 810 en.bmc-medical.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ST-SC-20-02-11-05-001-Ver1.0

BMC Mini Auto CPAP System M1 Mini



en.bmc-medical.com



viajar tan libre como la brisa

Diseño moderno y minimalista



Tamaño del dispositivo

Dimensión: 159 mm x 66 mm x 72 mm


Peso: <400 g

Tira de luz de anillo de colores

A través de diferentes colores y destellos, te retroalimenta una experiencia diferente.


Diseño antideslizante

Hay cuatro tiras de goma antideslizantes en la parte inferior, puede reducir eficazmente el deslizamiento del dispositivo durante el uso.

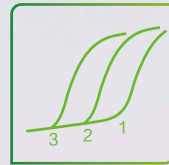

Sensibilidad de ajuste de presión

Estándar / Suave / Mujer,
en total tres niveles

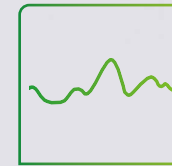

Inteligente A / C

Con la tecnología de ajuste de presión inteligente,
M1 Mini puede ajustar automáticamente el esquema de presión
de tratamiento de acuerdo con los cambios de las necesidades del paciente.



Rampa automática

Con la función de rampa automática,
el dispositivo puede detectar cuándo
el usuario se queda dormido y
ajustar el tiempo de rampa
de forma adecuada,
lo que hace que el tratamiento
sea más cómodo y eficaz.



Recordatorio de accesorios

Permita configurar los recordatorios
de reemplazo para el filtro de aire,
intercambiador de humedad, máscara, tubo de aire.






Recordatorio de mantenimiento


Permite configurar un recordatorio de mantenimiento
de 180 días o 360 días para mantener tu M1 Mini en
buenas condiciones.



BMC Mini App


M1 Mini adopta un estilo minimalista, sin diseño de pantalla ni botones táctiles ayuda a mejorar la apariencia de alta gama. Con la aplicación M1 Mini, te permite las siguientes operaciones →

-  Configurar el dispositivo
-  Verificar los resultados del tratamiento
-  Actualizar el firmware del dispositivo

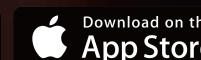



Una variedad de mascarillas con intercambiador de humedad disponible

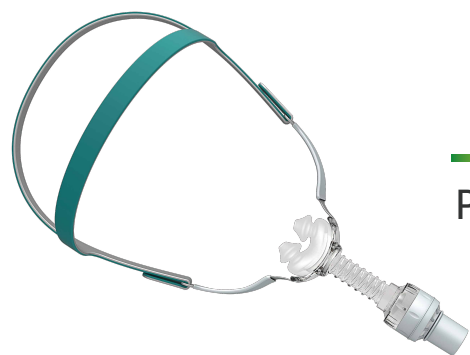

P2H Nasal Pillows Mask





N5H Nasal Mask



N5AH Nasal Mask


Escenarios de Aplicación

BMC M1 Mini es un CPAP de ajuste Automático con múltiples escenarios de uso, diseñado para el tratamiento de ronquidos y síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS).

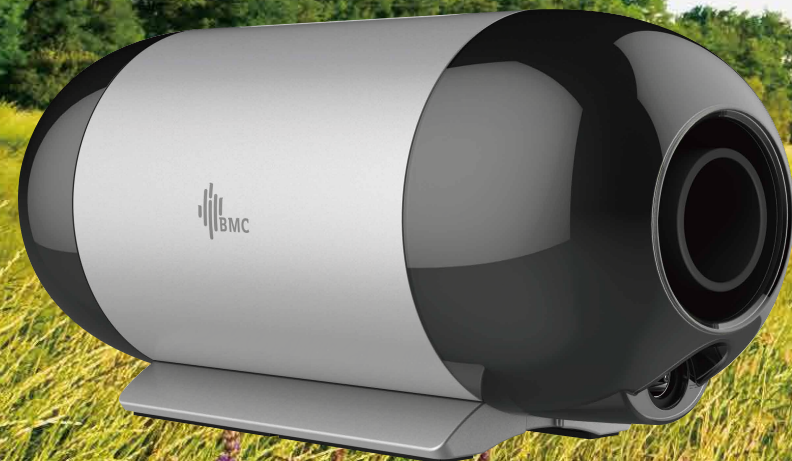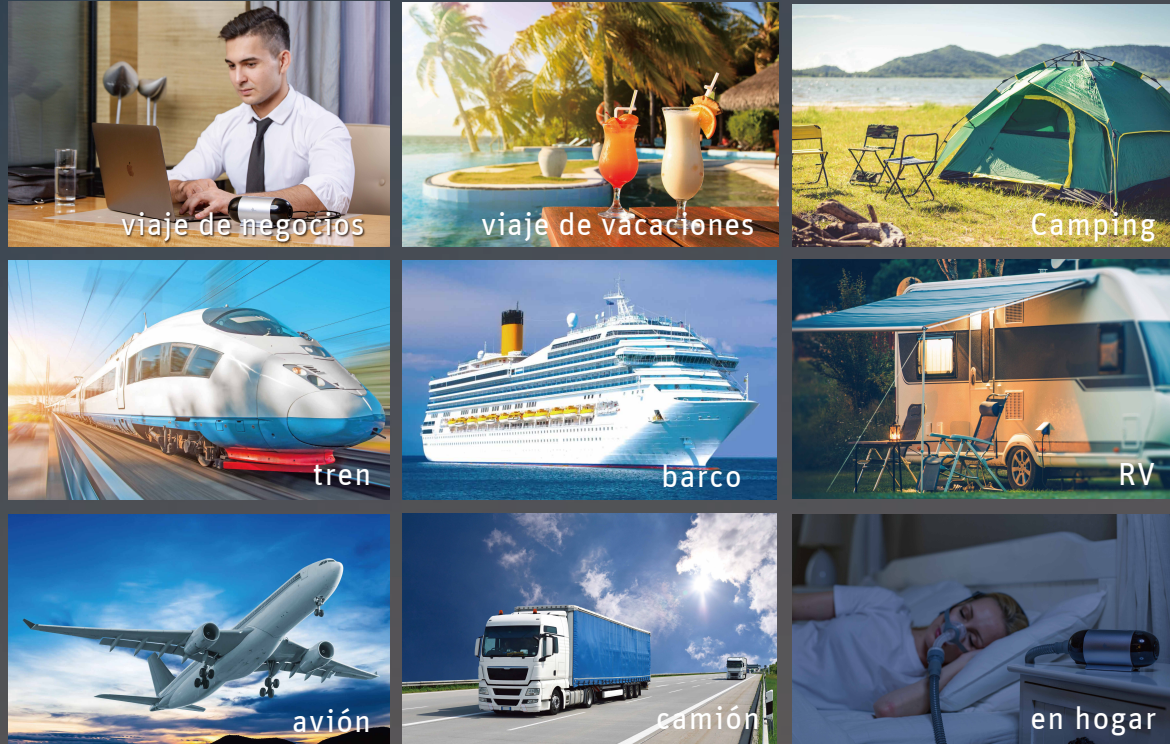



Accesorios de M1 Mini

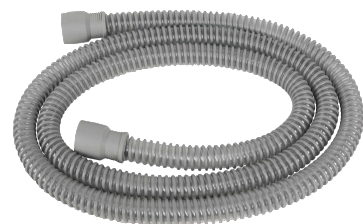


Tubo de Aire
• 15 / 22 mm Opcional



Estuche de Transporte



Bolsa de Almacenamiento

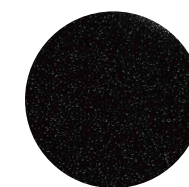

Filtro de Aire



Intercambiador de Humedad

Especificaciones

Ámbito de aplicación	Ronquidos y síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS).
Tamaño	Dimensiones: 159 mm × 66 mm × 72 mm Peso: < 400 g
Modo de trabajo	CPAP, AutoCPAP
Rango de presión	4 - 20 hPa
Precisión de presión	± 0.5 hPa
Sensibilidad de ajuste de presión	Estándar / Suave / Mujer
Inteligente A / C	Sí
Rampa	0 - 60 min / Auto
Reslex (liberación de presión expiratoria)	Apagado, Nivel 1 - 3
Auto On	Sí
Auto Off	Sí
Tipo de intercambiador de humedad	Regular/ Mejorado
Alerta de fuga	Sí
Recordatorio de accesorios	Sí
Compensación automática de fugas	Sí
Actualización de firmware vía la APP	Sí
Transmisión de datos inalámbrica	Sí
Nivel de presión de sonido	< 30 dB, cuando el dispositivo está funcionando a la presión de 10 hPa
Consumo de energía AC	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 1.0 A max
Entrada de voltaje y corriente	19 V, 1.26 A
Estuche de transporte	Opcional

