


Concentrador de Oxígeno - Jay 5Q

El concentrador JAY-5Q proporciona al usuario de 0 a 5 l/m, es del tipo de bajo ruido. Está diseñado con un concepto para un ahorro de energía y seguridad.

- ▶ Concentrador de oxígeno liviano y compacto, con flujo de 1 a 5 lts.
- ▶ Equipo confiable, duradero, con dos filtros uno interno y otro externo que asegura que no le entren impurezas al compresor y contamine la ciolita.
- ▶ Timer para terapias programadas.
- ▶ Innovadora pantalla LCD
- ▶ Alarma de:
 - Presión alta y baja,
 - Desconexión,
 - Baja concentración de oxígeno (opcional).
- ▶ Visualización de horas de uso en pantalla. y conteo de encendido
- ▶ Equipo silencioso.
- ▶ Presión de mpa (mega pascales) en pantalla que nos indica el buen funcionamiento del compresor y ciolita.
- ▶ Equipo de fácil transporte, por su base rodante.



ACCESORIOS INCLUIDOS: Vaso humidificador, Cánula nasal, Cable 220V, Filtros de repuesto,

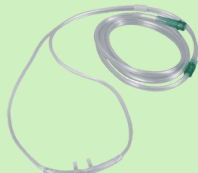

Especificaciones Técnicas

Modelo	JAY -5AW (JAY - 5Q)
Energía nominal (VA)	300
Voltaje de operación	AC220V±10%,50/60HZ±1; AC110V±10%,50/60HZ±1
Flujo de oxígeno (L/min)	0,5-5
Concentración de Oxígeno (%)	93%±3%
Presión de salida (Mpa)	0,04 - 0,07
Alarma	Falla de energía: baja y alta presión.
Ruido (dB(A))	≤43
Pantalla LCD larga	Tiempo acumulado. tiempo presente, botones de tiempo, Presión digital (exactitud:0.001MPa); Tiempo acumulado (rango 0-10000 hs; Tiempo presente (exactitud:1 minuto); Tiempo preajustado (exactitud:1 minuto); Opcional: temperatura digital (exactitud:0,1); Recordatorio de mantenimiento SPO2 digital (exactitud 1%)
Categoría eléctrica	Clase II, tipo B
Peso Neto (Kg)	16
Fusible de alimentación	T5AL/250V;T5AL/110V



C. OXIGENO - JAY 5Q