


Sepid

Concentrador de Oxígeno - Jay 10


LONGFIAN

Este concentrador de alta presión, provee una salida de 10 l/m de bajo ruido y se utiliza principalmente para el sistema central de suministro de oxígeno en pequeñas clínicas, hospitales, ICU, quirófanos e incluso veterinarias.

- ▶ Concentrador de oxígeno compacto con flujo de 1 a 10 lts.
- ▶ Equipo confiable y duradero. Contiene dos filtros interno de aire, el cual asegura una mayor fluidez al compresor, con menor esfuerzo.
- ▶ Timer para terapias programadas.
- ▶ Alarma de:
 - Presión alta y baja,
 - Desconexión,
 - Baja concentración de oxígeno (opcional).
- ▶ Equipo silencioso.
- ▶ Innovadora pantalla LCD
- ▶ Visualización de horas de uso en pantalla. y conteo de encendido
- ▶ Equipo de fácil transporte, por su base rodante.
- ▶ Presión de mpa (mega pascales) en pantalla que nos indica el buen funcionamiento del compresor y ciolita.

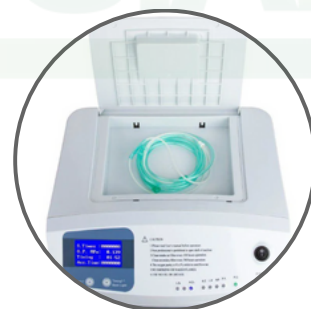

ACCESORIOS INCLUIDOS: Vaso humidificador, Cánula nasal, Cable 220V, Filtros de repuesto,

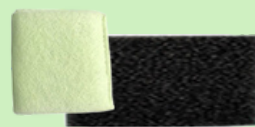

Especificaciones Técnicas

Modelo	JAY 10
Flujo	0-10 L/min
Pureza	1 a 9 l/m 93 ± 3% 10 L/m 90% ± 2%
Presión de salida (Mpa)	0.04-0.07
Nivel de ruido	≤50db
Alimentación	AC230V, 50Hz(AC220V±10%. 50/60±1Hz)
Potencia consumida	≤350W
Indicaciones del LCD	Presión de operación-Tiempo de uso. Tiempo acumulado, preseado de tiempo entre 10 min y 40 Hs.
Alarmas	Alarma por falla de alimentación. Alarma por alta o baja presión.
Tamaño (mm)	365x375x600mm
Peso Neto (Kg)	28 Kg
Categoría eléctrica	Clase II, tipo B



C. OXIGENO - JAY 10